


Methotrexaat Teva Pen




تعليمات الحقن

قبل الحقن

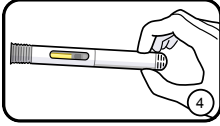

1 اغسل يديك بالماء والصابون

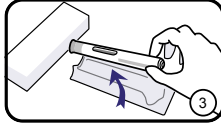


2 اجلس في وضعية مريحة




3 أخرج القلم من العبوة وتحقق من سلامة تغليف الأمان الموجود بين المنطقة البيضاء والغطاء الأخضر



4 اختر في كل مرة موضع حقن مختلف (شاهد الصورة في الجانب الخلفي)

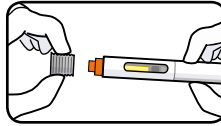


5 انزع غطاء القلم

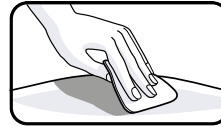

6 نظف مكان الحقن بمسحة طبية محتوية على كحول




7 اصنع ثنية في الجلد عن طريق الإمساك بجلدك برفق وابق ممسكاً بثنية الجلد

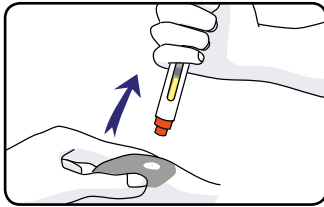

8 بعد النقرة الثانية يكون الحقن قد اكتمل. بعد فترة تتراوح من ثانيين إلى ثلاثة ثوانٍ، أبعاد القلم عن جلدك واترك ثنية الجلد



9 اضغط القلم لأسفل على الجلد حتى تسمع وتشعر بنقرة بدء الحقن

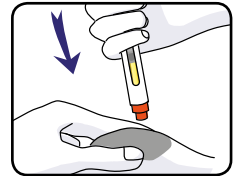

10 ضع غطاء حماية الإبرة ذي اللون البرتقالي تجاه موضع الحقن

بعد الحقن

11 افحص القلم بعد الاستخدام. لون الشاشة يجب أن يكون أخضرًا بعد الحقن. وهذا يعني أنه قد تم حقن كمية السائل بالكامل

12 ضع القلم المستخدم في الحاوية المخصصة للتخلص من الإبر المستخدمة. يتم حقن جرعة الدواء مرة واحدة كل أسبوع

