


Pripynstruksje


FOAR




1 Waskje jo hannen mei wetter en sjippe

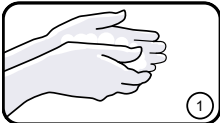

2 Gean yn in noflike posysje sitten of lizzen

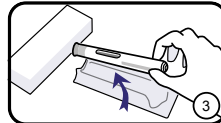

3 Helje de pripper út 'e ferpakking en kontrolearje of de fersegeling tusken it wite gedeelte en de griene dop yntakt is

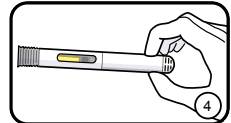


TIDENS




4 Wikselse by eltse ynjektsje fan plak (sjoch efterkant)




5 Meitsje it plak fan 'e ynjektsje skjin mei it alkoholdoekje

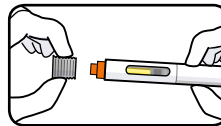

6 Ferwiderje de dop

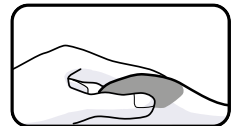


7 Meitsje in ploai yn 'e hûd troch der foarsichtich yn te knipen en hâld him fêst

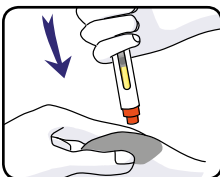

8 Set 'e nullebeskermer tsjin it plak fan 'e ynjektsje



9 Druk de pripper nei ûnderen tsjin jo hûd oan oant jo in klik hearre en fiele om 'e ynjektsje út ein te setten

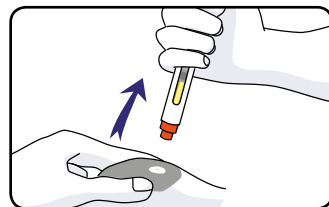

10 Nei de 2e klik is de ynjektsje klear. Ferwiderje nei 2 oant 3 sekonden de pripper út jo hûd en lit de ploai los

NEI

11 Kontrolearje de pripper nei gebrûk. It finster moat nei de ynjektsje grien wêze. Dit betsjut dat alle floeistof ynjektarre is

12 Doch de brûkte pripper yn 'e nullehâlder.

Medisyn ien kear yn 'e wike tatsjinje

